

нено[™]

denti

ANVÄNDARMANUAL



Bästa kund,

tack för att du köpt NENO DENTI. Din nya produkt är en elektrisk tandborste för barn. Den är avsedd för att borsta tänderna och upprätthålla god munhygien.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda anordningen.

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


1. Använd inte produkten om du inte förstår bruksanvisningen eller de försiktighetsåtgärder som nämns i denna bruksanvisning. Vid felaktig användning kan produkten utsättas för skador.
2. Plocka inte isär produkten. Detta kan nämligen leda till produktskador, elstötar samt att garantin slutar gälla.
3. Använd inte andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.
4. Använd inte lättantändliga eller explosiva ämnen för att rengöra produkten.
5. Produkten är endast avsedd för att borsta tänderna och massera tandköttet. Använd inte produkten i något annat syfte.
6. Sluta använda anordningen om den uppenbarligen är skadad.
7. Lagg inte produkten i vatten. Detta kan orsaka produktskador, en brand, elstöt eller explosion.
8. Håll produkten borta från behållare med vatten såsom badkar eller handfat.
9. Byt inte ut batterier med våta händer.
10. Använd inte gamla, förbrukade batterier.
11. Beakta batteriernas poler när du placerar dem i anordningen.
12. Placera inte anordningen i utrymmen med för hög fuktighet eller temperatur såsom badrum.
13. Ta ut batterier ur anordningen om du inte kommer att använda den på länge för att undvika brandrisk.
14. Om du använder en tandkräm som innehåller peroxider eller vätekarbonater (som numera ofta förekommer i tandkrämer med viteffekt), rengör noggrant anordningen efter användning så att dess plasthölje inte skadas.
15. Om barnet känner obehag eller om tandköttstillblödning förekommer, kontakta din tandläkare innan fortsatt användning.
16. Anordningen är inte avsedd för personer med begränsad fysisk, kognitiv eller intellektuell förmåga eller som saknar erfarenhet eller kunskaper, inbegripet barn. Om en sådan person vill använda anordningen ska detta ske under uppsikt av eller enligt instruktioner från personen som är ansvarig för honom/henne.

2. BESKRIVNING AV ANORDNINGEN



3. UPPSÄTTNINGEN INNEHÅLLER

1. Borste
2. Huvud med borste
3. Bruksanvisning
4. Massarare:
 - a. Gummihuvud för tandköttsmassage
 - b. Gummihuvud för tungan
 - c. Gummihuvud för rengöring av mellanrum

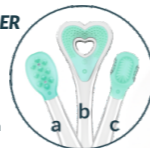

17. Anordningen är ingen leksak - håll den utom räckhåll för barn så att de inte använder den utan uppsikt av en vuxen.
18. Anordningen är avsedd för personlig hygien och bör inte användas på flera personer i tandläkarmottagningar.

4. STRÖMFÖRSÖRJNING

Anordningen behöver 1 AAA-batteri för att fungera korrekt. Skruva av höljet på anordningens nedre sida för att komma åt batteriutrymmet. Batterihållarens lock är fastskruvad så att barn inte kommer åt batteriutrymmet. Skruva av locket med en skruvmejsel och placera ett AAA-batteri enligt diagrammet nedan.



Skruva på batterihållarens lock igen. Placera höljet på plats igen och skruva fast det. Knoppen på höljet ska finnas under pilens nedre sida innan fastskruvning samt under pricken efter fastskruvning.



5. ANVÄNDNING

1. Placera borsthuvudet på handtagets plastdel med lampa.
2. Tryck strömförsörjningsknappen för att slå på huvudets bakgrundsbelysning.
3. Tryck ut tandkräm på borsten.
4. Tryck tandborsten lätt mot tänderna och tandköttet.

5. Tryck strömförsörjningsknappen för att aktivera tandborstens vibrationer och börja borsta tänderna. Borsta noga barnets alla tänder. Var 30:e sekund stannar tandborsten i 1 sekund så att du kan börja borsta en annan del av munnen. Det ska ta 2 minuter totalt att borsta tänderna. Anordningen stängs av automatiskt efter 2 minuter.
6. När du slutat borsta tänderna ska du stänga av tandborsten genom att trycka strömförsörjningsknappen.
7. Rengör tandborsten under rinnande vatten efter att du borstat tänderna. Skaka ut kvarliggande vatten ur borstens hår och använd ett mjukt tyg för att torka anordningens handtag.
8. Håll tandborsten i lodrätt läge när du inte använder den.

OBS! - För att inte spruta ut tandkrämsskum ska du stänga av anordningen innan du tar ut den ur munnen. För ditt barns hygien och säkerhet byt borsthuvud var tredje månad.

6. ATT TA HAND OM ANORDNINGEN

1. RENGÖRING AV TANDBORSTEN

- a. Rengör borsthuvudet och dess hår efter användning och låt det torka naturligt.
- b. Tryck inte håren med fingrarna och dra inte ut dem. Detta kan deformera och skada tandborsten.
- c. Torka handtaget med ett mjukt tyg och låt det torka naturligt.
- d. Doppa inte handtaget i vatten.
- e. Använd inte vatten med temperatur över 40 C eller syra baserade rengöringsmedel för att rengöra anordningen.

2. FAQ

Q: Vibrationer blir svagare under användning.

A: Du trycker tandborsten för hårt mot tänderna. Den ska röra lätt vid tänderna.

7. SPECIFIKATION

Kraftkälla:	1x bateria AAA
Batteri-liv:	Upp till 150 dagar
Vattentät:	IPX7
Nylonborste:	Ja
Iskua minutissa:	17000
Inbyggd timer:	Ja
Inbyggd LED-ljus:	Ja
Produktstorlek:	149x28x28mm
Vikt:	28 g

8. GARANTI

Produkt objety jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://nenopl/gwarancja>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: <https://nenopl/kontakt>

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, jego akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą/mi przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Producent:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b
31-752 Kraków
Polska

Wyprodukowano w P.R.C.



nenopl
www.nenopl
inspired by Children,
designed by Parents